MD-109

Manualul utilizatorului și Ghid de inițiere rapidă


(Română)

I . Prezentarea produsului

Acest produs este potrivit pentru copii mici, cât și pentru persoanele care suferă de incontinență. Este folosit pentru a îmbunătăți simptomele enurezisului. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a folosi produsul.

II . Caracteristici ale produsului

1.Structura produsului

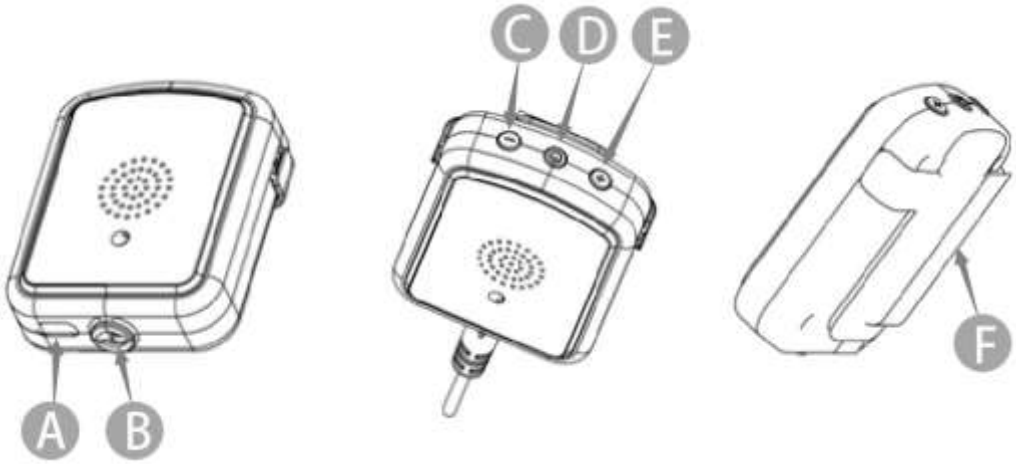

A-Interfață de încărcare Micro USB
B-Mufa senzorului
C-Volum/Buton selectare muzică -
D-Buton pornire-oprire/Mod selectare
E-Volum/Buton selectare muzică +
F-Clips de prindere

2.Cum se poartă produsul (3 modalități de purtare):



3.Funcții

3.1 Pornire: apăsați îndelung butonul de pornire pentru 5 secunde, se aprinde lumina albastră pentru 2 secunde apoi se oprește - alarma a fost pornită cu success.

3.2 Oprire: apăsați îndelung butonul de oprire timp de 5 secunde, se aprinde lumina roșie pentru 2 secunde - alarma se oprește.

3.3 Mod de utilizare, Alarma are 3 moduri:
Mod 1: Sunet tare + Vibrație puternică + Lumini puternice
Mod 2: Sunet tare + Lumini puternice
Mod 3: Vibrație puternică + Lumini puternice
După pornire, apăsați butonul de selectare pentru a selecta unul dintre cele 3 moduri, după oprire va reveni la modul implicit.

3.4 Ajustarea volumului: apăsați butonul "-", volumul va scădea gradual de la cel mai tare la cel mai scăzut, apăsați butonul "+" volumul crește gradual de la cel mai scăzut la cel mai tare. Ajustați volumul corespunzător și eliberați butonul.

3.5 Schimbare muzică
Apăsați rapid butonul "-" de două ori pentru a comuta următoarea melodie.
Apăsați rapid butonul "+" de două ori pentru a trece la ultima melodie.

3.6 Incărcare: Utilizați încărcător 5V cu port USB. Prima dată încărcați complet pentru a activa bateria.
Alertă baterie scăzută: Când bateria este slabă, lumina roșie clipește continuu, în acest punct alarma nu mai funcționează, trebuie încărcată.
Status încărcare: lumina roșie este pornită întotdeauna la încărcare, când dispare lumina roșie, bateria este încărcată complet, scoateți cablul de alimentare.

III. Întrebări frecvente:

1. Când produsul nu reacționează:

1.1 Verificați dacă e pornit.
1.2 Bateria este slabă, reîncercați după încărcare.
1.3 Scoateți senzorul și reîncercați.

2. Când alarma nu se oprește: scoateți senzorul și reîncercați.

IV. Chestiuni care au nevoie de atenție

1. Fixați senzorul pe o bucată de material uscată pentru testarea umidității înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura că alarma funcționează normal.
2. Clipsul senzorului trebuie curățat constant.

3. Verificați dacă bateria este încărcată suficient la fiecare folosire, și încărcați atunci când nivelul este scăzut.
4. Dacă alarma nu este folosită un timp mai îndelungat, încărcați bateria și opriți produsul.

V . Conținut

Alarma Enurezis × 1
Senzor × 2
Cablu încărcare USB × 1
Elastic de braț reglabil × 1
Jurnal de progress × 1
Manual de instrucțiuni în limba engleză ×1

VI .Garanție și retur

Alarma enurezis are o garanție de 1 an de zile. Garanția nu acoperă utilizarea necorespunzătoare sau uzură excesivă.

Clientul are dreptul să notifice în scris că renunță la cumpărarea produselor deja comandate, fără a plati penalități și fără a invoca un motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului.

În acest caz, societatea noastră va rambursa sumele achitate de către dumneavoastră, în cel mult 30 zile de la data la care primim produsul returnat, respectiv notificarea Dvs. scrisă trimisă pe adresa sediului societății.

Conform dispozițiilor în vigoare, clientul va suporta în acest caz doar cheltuielile de expediție.

De reținut: Produsele returnate în acest termen, trebuie să fie intacte, în sensul că nu trebuie să prezinte nicio urmă de deteriorare sau uzură și trebuie să fie în ambalajul lor original.

În cazul în care produsul are ambalajul deteriorat sau nu-l mai are, acesta nu mai poate fi returnat.